


Mekanisk Portabelt Bidet

Delebeskrivelse



Illustrasjon av bruk

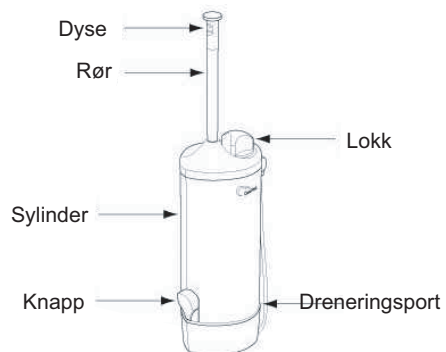

Spesifikasjoner

Modell	
Størrelse	Normal : 60 X 50 X 144mm Ved bruk : 60 X 50 X 220mm
Vekt	140g
Dusjvolum	~ 4.5 ml/sek
Tank volum	~ 140cc

Bruk



Skru opp lokket mot klokken retning.



Trekk opp vanntanken ved å vri sylindren i pilens retning.



Fyll sylindren med vann



Skru igjen topplokket.




Trekk ut dysen og trykk på knappen for bruk.



Tøm ut vannrester etter bruk.


Forholdsregler

Apparatet må ikke slippes i gulvet eller utsettes for støt som kan skade apparatet.

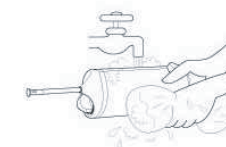


Apparatet rengjøres med temperert vann. Det må ikke skylles eller dyppes i veldig varmt vann da dette kan skade apparatet.

Bruk ikke ekstra kraft på dysenda dette kan skade apparatet.

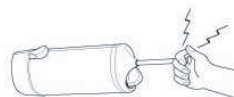

Fyll ikke apparatet med varmt vann eller la vann bli værende i tanken, da dette kan skade apparatet.

Forsøk ikke å demontere apparatet da dette kan skade apparatet og føre til personskade.

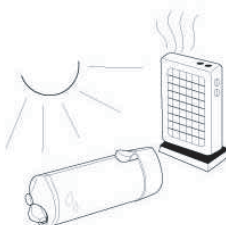

Må ikke utsettes for direkte sollys eller plasseres nær varmeovn, da dette kan skade apparatet.

Bruk ikke apparatet uten at dysen er trukket ut eller uten at det er vann i tanken da dette kan skade apparatet.



Tøm ut eventuelt vann fra bunnen av apparatet minst 1-2 ganger i måneden.

* Bruk vann med temperatur 40°C eller lavere for å forhindre personskade.

Bruksområder:

- Ved diare på reiser
- Ved bleieskift på spedbarn og etter defekasjon.
- Personer som er plaget av hemorroider, forstoppelse, urinlekasje, underlivsinfeksjoner etc.
- Ved menstruasjon, Ved økt utflod hos gravide før og etter fødsel.
- Personer med sensitiv hud
- Pasienter ved sykeleie og bevegelseshemmede